

**DEKA**  
Innate Ability

DAS NEUE **PRO SYSTEM**

**MOTUS**  
**PRO**

## Wirksamkeit und Schnelligkeit bei Schönheitsbehandlungen

Unübertroffene Leistung bei Haarentfernung,  
Gefäßbehandlung und Hautverjüngung.

MOTUS PRO zeichnet sich in der **Ästhetik** und **Dermatologie** aus.



# MOTUS PRO

WEITERENTWICKELTE  
EXZELLENZ

HAARENTFERNUNG

VASKULÄRE  
BEHANDLUNGEN

GUTARTIGE PIGMENTIERTE  
LÄSIONEN

MIKRO-ABLATIVE  
HAUTVERJÜNGUNG

BEINVENEN

PSEUDOFOLLIKULITIS  
BARBAE (PFB)

ONYCHOMYKOSIS

VOLLSTÄNDIGE  
GESICHTSBEHANDLUNG  
(MOVEO GLO)



# Schlüsselprinzipien


Die MOTUS-Technologie hat die Erfahrung der Patienten bei schmerzfreien Haarentfernungsbehandlungen verändert. Heute wird die MOTUS-Familie von DEKA durch die Einführung von MOTUS PRO erweitert: Eine Plattform mit zwei sich ergänzenden Wellenlängen (755 nm Alexandrit und 1064 Nd:YAG), die in ihrem Stil und ihrer Leistung überarbeitet wurde und mit höheren Leistungsstufen, schnelleren Behandlungen, einer breiten Palette von Spotgrößen und spezifischen Impulsen diese Neuheit zu einer der fortschrittlichsten und flexibelsten im Bereich der Dermatologie macht.

## Warum MOTUS PRO:

Hohe Spitzenleistung  
2-3 ms

### Schnell, sicher und leistungsfähig

Die Behandlungsdauer wird dank maximierter Leistung, größerer Spotgröße (bis 24 mm) und erhöhter Spitzenleistung um 50 % reduziert.

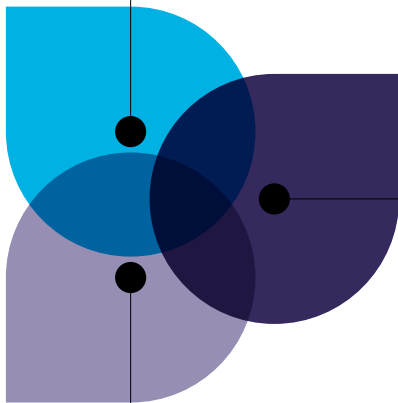

### Traditionelle und Moveo Technologie

MOTUS PRO verfügt über zwei Behandlungstechnologien: Mehr als 10 Standard-Handstücke und 4 Moveo-Handstücke, um alle Arten von Patientenwünschen mit dem am besten geeigneten Instrument behandeln zu können.

### Komfort und Ergebnisse

Dank der höheren Leistung sind die Behandlungen effektiver und das Schmerzempfinden geht gegen Null (die Kühlleistung hat sich um 40 % erhöht).

# MOTUS PRO

DIE WISSENSCHAFT DAHINTER

## Haarentfernung: Der Erfolg liegt in Ihrer Hand

**MOTUS PRO** führt ein effektiveres und extrem flexibles Zwei-Wellenlängen-System ein, das zuverlässige, kosteneffektive Behandlungen für alle Haartypen (auch für feinste und helle) und Hauttypen (auch für dunklere) ermöglicht. Motus PRO macht die Haarentfernung mit Alex effektiv und schmerzfrei. Die Nd:YAG-Quelle erweitert den Wirkungsbereich, indem sie die Behandlung von vaskulären Läsionen wie Kapillaren oder Teleangiektasien sowie Hautverjüngungsmaßnahmen ermöglicht.

- Mehr als 10 wählbare Handstücke
- **24 mm Spotgröße verfügbar**
- Automatisches Spot-Erkennungssystem
- Ergonomischer Anschluss für Luftkühlungsgeräte

**24 mm  
Spotgröße**



## GEFÄSSBEHANDLUNG: LANGE IMPULSE 1064 nm

**MOTUS PRO** führt einen optimierten Puls für Gefäßbehandlungen ein, der die Wirksamkeit maximiert und Schmerzen reduziert.

DIE WISSENSCHAFT DAHINTER

## Die Moveo Innovation

**Moveo-Handstücke** reduzieren die vom Gewebe reflektierte Energiemenge drastisch, indem sie bei geringerer Fluenz in Kontakt mit der Haut arbeiten. Diese exklusive Technologie von DEKA ist für eine breite Palette von Anwendungen geeignet.

moveo **HR**

### Fokus auf Haarentfernung

Die Moveo HR-Technologie besteht aus mehreren Durchgängen über kleine definierte Bereiche. Dies führt zu einer allmählichen Erwärmung und Zerstörung der unerwünschten Haare. Das Verfahren ist nahezu schmerzfrei und hat praktisch keine Nebenwirkungen.

moveo **PL**

### Fokus auf pigmentierte Läsionen

Durch die schrittweise Erwärmung der pigmentierten Läsionen ist MOVEO PL hochwirksam und komfortabel, ohne Hautverfärbungen oder Hypopigmentierung.

moveo **SR**

### Fokus auf Hautverjüngung

Die kontrollierte Multipass-Wirkung von MOVEO SR führt zu einem progressiven Wärmeanstieg auf der Haut, der einen Neokollageneseprozess anregt.

moveo **VL**

### Fokus auf Hautverjüngung

Die spezifische Wirkung von MOVEO VL wirkt direkt auf vaskuläre Läsionen mit reduzierter Energierückstrahlung. Das macht MOVEO VL sehr wirksam bei oberflächlichen Gefäßrötungen.

moveo **PL** + **SR** + **VL** = moveo**Glo**

Mit der Moveo Glo Stacked-Behandlung kann MOTUS PRO gezielt vaskuläre Läsionen, Kollagenstimulation und pigmentierte Läsionen mit Komfort und ohne Ausfallzeiten behandeln.





DIE PERFEKTE KOMBINATION

## Stärken von Motus PRO

- **Flexible Hochleistungslasertechnologie**  
mit einem breiten Spektrum an Spotgrößen, Fluenzen und Wiederholungsraten für schnelle und effiziente Behandlungen.
- Geeignet **für jeden Hauttyp**, jeden Haartyp und alle Körperbereiche.
- **Schnell, sicher und schmerzlos** mit Moveo-Handstücken.
- **Einfacher Wechsel zwischen Wellenlängen**  
und verschiedenen Behandlungen innerhalb einer einzigen Sitzung.
- **Know-how immer zur Hand** dank der integrierten Protokolldatenbank für alle Haartypen, Hauttypen und Behandlungen.
- **Niedrige Wartungskosten**



**Nur für DEKA Kunden:**

Eine tolle Unterstützung in der Arztpraxis

**DEKA** Club



# Technische Spezifikationen

MOTUS PRO		
Laserquelle	755 nm Alexandrit	1064 Nd:YAG
Energie pro Impuls *	52 J (max.)	63 J (max.)
Pulsdauer	0,2 – 300 ms	
Wiederholungsrate	Bis zu 12 Hz	
Spotgrößen (optional)	Von 2,5 mm bis 24 mm, Moveo HR, Moveo PL, Moveo SR, Moveo VL	
Fluenz	Bis zu 600 J/cm <sup>2</sup>	
Abmessungen und Gewicht	114 (H) cm x 45 (B) cm x 94 (T) cm   100 Kg	
Elektrische Anforderungen	<16A @230 Vac	

\* Es ist eine Version mit einer einzigen Wellenlänge verfügbar, die nur mit einem Alexandritlaser oder Nd:YAG-Laser ausgestattet ist.

**GEFAHR - Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung. Augen- oder Hautkontakt mit direkter oder gestreuter Strahlung vermeiden. Laserprodukt der Klasse 4.**

Diese Broschüre ist nicht für den US-Markt bestimmt.



Die Produkte von DEKA werden in Deutschland und Österreich exklusiv von Asclepion Laser Technologies vertrieben und sind Teil der Asclepion Family.



[www.asclepion.de](http://www.asclepion.de) | Tel. +49 3641 / 77 00 - 100



**DEKA M.E.L.A. s.r.l.**

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italy  
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

#### DEKA Innate Ability

Als Spin-off der El.En. Group ist DEKA ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Lasern und Lichtquellen für Anwendungen im medizinischen Bereich. DEKA vertreibt seine Geräte in mehr als 120 Ländern über ein ausgedehntes Netzwerk internationaler Vertriebshändler sowie über Direktvertriebsstellen in Italien, Frankreich, Japan und den USA. Exzellenz ist das Markenzeichen von DEKA: Erfahrung und Anerkennung im Bereich Forschung und Entwicklung in über dreißig Jahren Tätigkeit. Qualität, Innovation und technologische Exzellenz verschaffen DEKA und seinen Produkten eine einzigartige und herausragende Position auf der globalen Bühne. DEKA stellt Lasergeräte gemäß den Spezifikationen der Richtlinie 93/42/EWG her und sein Qualitätssicherungssystem entspricht den Normen ISO 9001 und ISO 13485.\*