

Die leistungsstarke Lösung
für eine nicht-invasive
Verbesserung der Hautstruktur

YellowStar®

PURE LIGHT. NATURAL SKIN RENEWAL.

YellowStar[®]

PURE LIGHT. NATURAL SKIN RENEWAL.



Eine neue Dimension der Hauterneuerung

Viele Patientinnen und Patienten wünschen sich heute vor allem eines: natürliche, aber sichtbare Ergebnisse. Im Mittelpunkt steht ein verbessertes Hautbild, das zur eigenen Ausstrahlung passt. Mit klarerer Struktur, ebenmäßigem Teint und dem Gefühl, sich wieder selbstbewusst zu zeigen.

Aus diesem Anspruch heraus ist YellowStar® entstanden. Die Idee: Wissenschaft und Natur so zu verbinden, dass Technologie die Haut gezielt aktiviert und ihre Regenerationsprozesse spürbar voranbringt. Für Ergebnisse, die überzeugen, ohne künstlich zu wirken.

Die Kraft des Lichts, inspiriert von der Sonne

Die Sonne steht in allen Kulturen für Licht, Lebenskraft und den Rhythmus des Lebens. YellowStar® greift diese universelle Symbolik auf. Als Inspiration dafür, wie wir Licht wahrnehmen und verstehen.

Licht ist kraftvoll und intensiv. Damit es wohltuend wirkt, braucht es die richtige Balance aus Steuerung und Kontrolle. Genau hier zeigt YellowStar® seine technologische Stärke.



Spürbare
Veränderung

Licht, das
neu definiert

577_{nm}

die
Genauigkeit
der Wissen-
schaft

Wo Licht auf Haut trifft, verfeinert durch die Wissenschaft


Das gelbe Licht mit einer Wellenlänge von 577 nm steht für Eigenschaften, die wir mit natürlichem Sonnenlicht verbinden – Wärme, Regeneration und Vitalität. Im Laser vereint, werden diese Eigenschaften durch moderne Wissenschaft und präzise Technik in eine kontrollierte, gezielte Anwendung überführt.

Das Laserlicht wird so gesteuert, dass es exakt auf die Bedürfnisse der Haut abgestimmt ist. Dieser Ansatz ermöglicht eine gezielte Lichtapplikation und unterstützt ein ebenmäßiges, klares und sichtbar verfeinertes Hautbild.

Von der Natur inspiriert, perfektioniert durch Asclepion


YellowStar® steht für einen modernen ästhetischen Ansatz, der auf intuitive Bedienung und eine nahtlose Integration in den Praxisalltag ausgelegt ist. Entwickelt von Asclepion mit deutscher Präzision und medizinischer Zuverlässigkeit, vereint das System modernste Photonik-Technologie in einem Gerät, das sich einfach anwenden lässt und zugleich überzeugende Ergebnisse ermöglicht. YellowStar® ist dabei mehr als ein Lasersystem – es definiert moderne Hautpflege neu.

Globaler Markt für Laserbehandlungen zur Verbesserung der Hautstruktur

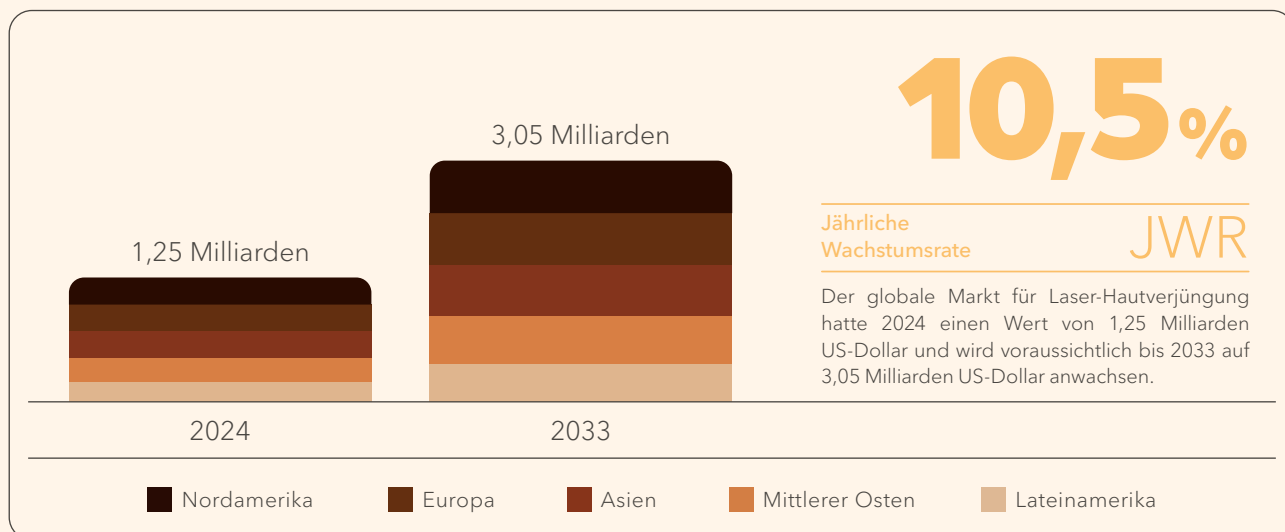

Der globale Markt für Laserbehandlungen zur Verbesserung der Hautstruktur verzeichnet ein bemerkenswertes Wachstum. Dieser dynamische Sektor revolutioniert die ästhetische Medizin durch nicht-invasive Laserlösungen zur Verbesserung des Hautbildes und der allgemeinen Hautqualität. Millennials greifen so häufig wie nie zuvor auf präventive Anti-Aging-Behandlungen zurück, und die Lasertechnologie der nächsten Generation bietet Präzision, Sicherheit und Schnelligkeit, wodurch die Behandlungen zugänglicher und erschwinglicher werden.

Globaler Markt für Laserbehandlungen von Gefäßläsionen

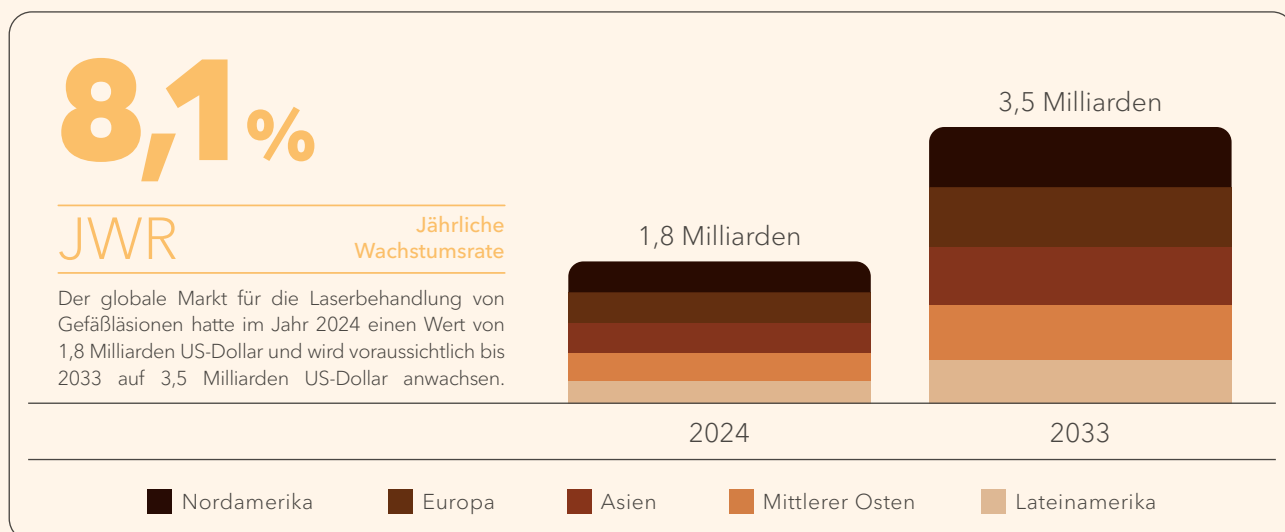

Der globale Markt für Laserbehandlungen von Gefäßläsionen verzeichnet ein signifikantes Wachstum. Er verändert die Branche der professionellen ästhetischen Medizin und Dermatologie grundlegend, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung von Gefäßerkrankungen der Haut und eine immer stärker auf Schönheit bedachte Kundschaft. Erkrankungen wie Besenreiser, Hämangiome und Feuermale betreffen weltweit Millionen von Menschen. Modernste Lasertechnologien sowie die wachsende Nachfrage nach minimalinvasiven Behandlungen treiben das Marktwachstum sowohl in Krankenhäusern als auch in Praxen voran.


Vervollständigen Sie Ihre Praxis mit YellowStar®

Erweitern Sie Ihre Behandlungsmöglichkeiten mit unserem YellowStar®-Lasersystem der nächsten Generation. Es wurde entwickelt, um die Hautstruktur zu verbessern und verschiedene dermatologische Probleme zu behandeln. Seine vielseitige HOPSL-Technologie behandelt Pigmentstörungen wie Sonnenflecken, Altersflecken sowie Melasma und reduziert gleichzeitig Gefäßunregelmäßigkeiten wie Rötungen, erweiterte Äderchen und Rosacea.

Die Kombinationstherapie COOL YELLOW® behandelt Gefäßveränderungen und Pigmentstörungen und trägt gleichzeitig zu einer sichtbaren Verbesserung der Hautstruktur bei. Bei zu Akne neigender Haut unterstützt es die Reduzierung von Hautunreinheiten, fördert ein klareres Hautbild und trägt zur Verbesserung des Erscheinungsbildes von postinflammatorischen Veränderungen wie PIE* und PIH** bei. Es bietet effektive Lösungen zur Verbesserung der Hautstruktur und trägt zur Weiterentwicklung der Standards in der ästhetischen Medizin bei.

Warum 577 nm den Unterschied ausmacht

Mit seiner Wellenlänge von 577 nm zielt YellowStar® auf das Absorptionsmaximum von Oxyhämoglobin ab und ermöglicht so eine hohe Gefäßselektivität und eine kontrollierte Interaktion mit der Haut. Gleichzeitig ist die Melaninabsorption geringer, wodurch das Risiko von Pigmentstörungen reduziert wird, während oberflächliche Gefäße effektiv koaguliert werden. Klinische Studien belegen die Wirksamkeit der 577-nm-Wellenlänge für Gefäßanwendungen mit Fokus auf eine kontrollierte und selektive Behandlung.

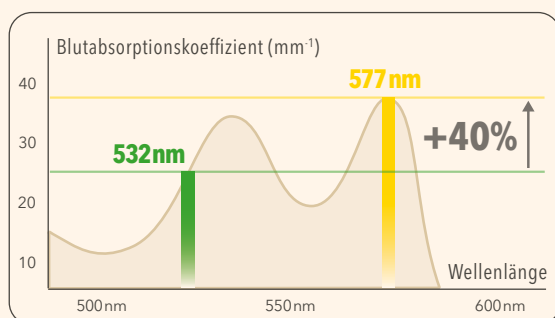

- Sanfte Behandlung dank Wellenlänge und Hautkühlung
- Erhöhter Patientenkomfort durch verkürzte Pulszeiten
- Geeignet für empfindliche und dunklere Haut***
- Fördert eine sofortige Vitalisierung des Hautbildes
- Minimierte Purpura mit kurzer Ausfallzeit
- Kurze und effiziente Behandlungszeiten

* Postinflammatorisches Erythem, ** Postinflammatorische Hyperpigmentierung, *** bis Fitzpatrick-Grad V

COOL YELLOW®
BY ASCLEPION

... ist eine fortschrittliche Laserbehandlung mit zwei Wellenlängen, die die Präzision von 577-nm-Gelblicht mit dem Er:YAG-Laser kombiniert. Dadurch werden Rötungen, Gefäßläsionen und Sonnenschäden effektiv reduziert und gleichzeitig Hautstruktur und -ton verbessert. Durch das perfekte Zusammenspiel von YellowStar® und Dermablade® erreichen Sie eine maximale Hautverjüngung in einer hocheffizienten Sitzung.



Erweiterter Leistungsbereich, gesteuert durch kürzere Pulse.

Kürzere Pulse in Kombination mit erhöhter Ausgangsleistung ermöglichen eine präzise Energiezufuhr bei gleichzeitiger Reduzierung der thermischen Belastung und unterstützen so sichere und kontrollierte Behandlungsbedingungen.



Das System

FEATURES

Cool bleiben. Smarter behandeln.

Das im Scanner integrierte, fortschrittliche dreistufige Kühlsystem arbeitet bei niedrigeren Temperaturen als sein Vorgänger und sorgt so für maximalen Komfort und einen effektiven Hautschutz bei Behandlungen über große Scanbereiche.

Mehr Platz. Mehr Flexibilität.

Die größere Ablagefläche auf dem Gerät bietet Platz für Schutzbrillen und Zubehör und sorgt so dafür, dass wichtige Utensilien stets griffbereit sind. Ein optionaler Trolley bietet zusätzlichen Stauraum.

Für Bewegung konzipiert. Für Leistung gebaut.

Integrierte ergonomische Griffe, ein modularer Handstückhalter und ein kompaktes Design gewährleisten mühelosen Transport überall dort, wo der Laser benötigt wird.



Präzision in Ihrer Hand

Das leichte Fokus-Handstück mit abnehmbarem Edelstahl-Distanzstück bietet eine verbesserte Ergonomie für eine einfachere Handhabung und erhöhten Bedienkomfort bei langen Eingriffen.



Erhöhte Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Das Kontakthandstück ist mit einem innovativen Kontaktsensor ausgestattet, der den Laser automatisch deaktiviert, wenn kein ausreichender Hautkontakt mit dem Handstück mehr gewährleistet ist. Dadurch werden sichere Eingriffe unterstützt.



Geschwindigkeit trifft auf Intelligenz

Das Scannerhandstück wurde neu gestaltet, um schnellere Behandlungen zu ermöglichen, und verfügt über zahlreiche Funktionen, die den täglichen Arbeitsablauf des Anwenders vereinfachen:

- 196 Einzelspots und 15 x 15 mm Scanbereich
- Mehrere Scanformen und -modi für erweiterte Funktionen
- Integrierter Kontaktsensor für sichere Laserbehandlung
- Saphirglas mit entspiegelter Beschichtung minimiert Rückreflexionen
- Verbesserte Ergonomie für komfortables Arbeiten den ganzen Tag
- Plug-&-Play-Anschluss für schnelle und einfache Installation



Handstücke

FEATURES

Intelligente
Ergonomie.
Nahtloser
Workflow.

Der modulare Handstückhalter lässt sich einfach am Gerät befestigen und ermöglicht so eine schnelle Einrichtung und nahtlose Integration in den Arbeitsablauf.

Unterstützung,
die sich mit
Ihnen bewegt.

Das ergonomische Galgen-
system dient dazu, den Faser-
schlauch während der Behand-
lung zu führen und zu stützen,
wodurch die Belastung
reduziert und die Präzision
verbessert wird.

Handstück-
erkennung
für fehlerfreien
Betrieb.

Die Faser verfügt über
integrierte Elektronik zur
automatischen Erkennung aller
Handstücke. Der verbesserte
Faserschutz verlängert die
Lebensdauer der Faser.



Benutzeroberfläche

Modernes Display. Intuitive Benutzeroberfläche.

Erleben Sie mit dem 10,1-Zoll-LCD-Touchscreen eine nie dagewesene Klarheit. Die intuitive Benutzeroberfläche passt sich sowohl Einsteigern als auch Profis an und ermöglicht eine reibungslose und effiziente Bedienung. Starten Sie mit einem intelligenten Startbildschirm, der drei übersichtliche Bedienkonzepte bietet: Modi, Indikationen und Favoriten.

Klar. Hell. Intelligentes Design.

Entdecken Sie eine Benutzeroberfläche, die für optimale Sichtbarkeit entwickelt wurde. Große Schaltflächen und klare Symbole ermöglichen eine einfache Bedienung, während hoher Kontrast und brillante Farben eine schnelle Erkennung gewährleisten. Puls- und Energiezähler in Echtzeit informieren den Anwender während der Behandlung.

Dark- und Light-Modus. Wählen Sie den Stil.

Der Dark- und Light-Modus ermöglichen eine einfache Anpassung der Benutzeroberfläche an unterschiedliche Umgebungen. Ein einziges Tippen wechselt zwischen den Modi und reduziert so die Augenbelastung bei schwachem Licht oder verbessert die Sichtbarkeit bei hellem Licht.



Zubehör

Kabelloser Fußschalter

Die einfache Einrichtung ermöglicht eine nahtlose Integration. Schluss mit Kabelsalat, für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Kabellose Steuerung. Sauberer Arbeitsplatz.



Maßgefertigter Trolley

Vereint Ästhetik mit praktischer Funktionalität, bietet großzügigen Stauraum und hohe Flexibilität.

Stauraum. Mobilität. Zeitloser Stil.



Premium-Koffer

Dank seiner passgenauen Innenausstattung vereint das Premium-Etui Eleganz, Mobilität und Zuverlässigkeit mit Leichtigkeit.

Perfekte Passform. Erstklassiger Stil. Mühelose Bewegungsfreiheit.



YellowStar®

bietet nützliches optionales Zubehör zur Unterstützung der täglichen klinischen Arbeit.

TECHNISCHE DATEN

Laser	HOPSL*, Klasse 4	Scanbereich	Max. 15 mm x 15 mm (196 Spots)
Wellenlänge	577 nm	Scandichte	40%, 60%, 80%, 100%
Leistung	Max. 8 W	Scanformen	Quadratisch, rechteckig, rund
Pulsdauer	2 – 150 ms	Scanmodi	Linear, randomisiert
Frequenz	1 – 100 Hz	Scankühlung	3-stufige Kühlung
Modi	Gepulst oder kontinuierlich	Display	10,1" LCD mit Touchscreen
Handstücke	Fokus, Kontakt, Scanner	Abmessungen	43 cm x 41 cm x 19 cm (B x T x H)
Spotgröße	1 mm	Gewicht	Ca. 15 kg

* High-power Optically Pumped Semiconductor Laser. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

www.asclepion.com



..... IMMER DIE NEUESTEN PRODUKTINFORMATIONEN

CE IN VORBEREITUNG

 **MADE IN GERMANY**

